

80 521 10 Cuvette block, (4pos/ea)

Information of use

The Cuvette block as general laboratory article is suitable to hold a reaction mixture for use in optical analyzers which are used in laboratories for in vitro diagnostic tests.

The cuvettes are ready for immediate use. They have unlimited shelf life if stored at 0 - 50°C.

Content

Product	Cuvette block	1000 pcs
Cat.No.	80 521 10	
Content	50 bundles (= 20 blocks 4 pcs.)	4000 det.

The Cuvettes can be used with Coatron A (1800) Analyzers.

Depending on configuration of IVD analyser instrument a cuvette "activation"-code could be necessary. In this case the box contains an appropriate Voucher with a VIN and PIN code to generate a ticket on the web-based registration page (www.teco-reg.com).

The ticket information (VIN/PIN) must be entered for the respective device to release the number of tests for this device only. The (VIN/PIN) can only be used once per unit.

Precautions and waste information

The Cuvette should only be used once in analyzers. To prevent contamination (sample/reagent), it is advised to avoid contact with skin and eyes. Suitable protective clothing and gloves are recommended.


Please also note the disposal of components in accordance with local regulations for infectious material.

Material: pure, clear Polystyrol (PS)

Maximum volume per Single use Unit should be less than ~ 1000µL

Minimum volume: 150 µL

Dimensions max.: (mm) L48 x H27 x W9,5

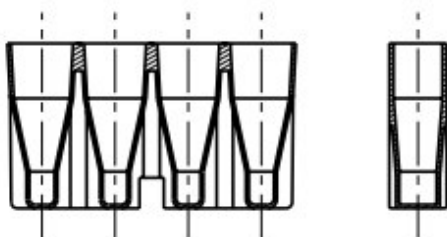


80 521 10

Example Picture of the package – 1000 Cuvettes blocks



Packaging:

1. Card Box, Dim.: (mm) 410 x 260 x 145
2. Labeling (see below)

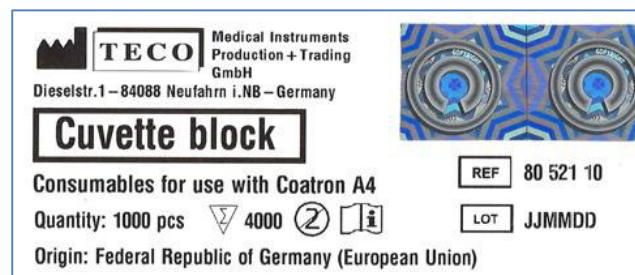

Symbols key (if applicable):

Manufacturer	Lot. Number	Catalogue Number	Consult accompanying documents	Determination	Single use
--------------	-------------	------------------	--------------------------------	---------------	------------

80 521 10 Cuvette block, (4pos/ea)

Gebrauchsinformation

Die Küvette als allgemeiner Laborartikel eignet sich zur Aufnahme eines Reaktionsgemisches zur Verwendung in optischen Analysegeräten, welche in Laboren für in-vitro-diagnostische Tests verwendet werden.

Die Küvetten sind sofort einsatzbereit. Sie sind unbegrenzt haltbar, wenn sie bei 0 - 50°C gelagert werden.

Inhalt

Product	Küvetten Block	1000 Stck.
Kat.Nr.	80 521 10	
Inhalt	50 Bündel (=20 Blöcke/ 4Stck.)	4000 Best.

Die Küvetten können mit dem voll-automatischen Koagulations System Coatron A4 (1800) verwendet werden.

Je nach Konfiguration des IVD-Analysegerätes kann ein Küvetten-"Aktivierungs"-Code erforderlich sein. In diesem Fall enthält die Box einen entsprechenden Voucher mit einem VIN- und PIN-Code, um ein Ticket auf der webbasierten Registrierungsseite (www.teco-reg.com) zu generieren.

Die Ticketinformationen (VIN/PIN) müssen für das jeweilige Gerät eingegeben werden, um die Anzahl der Tests nur für dieses Gerät freizugeben. Die (VIN/PIN) kann nur einmal pro Gerät verwendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen und Entsorgungshinweise

Die Küvette sollte nur einmal im Analysegerät verwendet werden. Um eine Kontamination (Probe/Reagenz) zu vermeiden, ist es ratsam, den Kontakt mit Haut und Augen zu vermeiden. Es werden geeignete Schutzkleidung und Handschuhe empfohlen.


Bitte beachten Sie auch die Entsorgung der Komponenten in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften für infektiöses Material.

Material: pure, clear Polystyrol (PS)

Maximum volume per Single use Unit should be less than ~ 1000µL

Minimum volume: 150 µL

Dimensions max.: (mm) L48 x H27 x W9,5

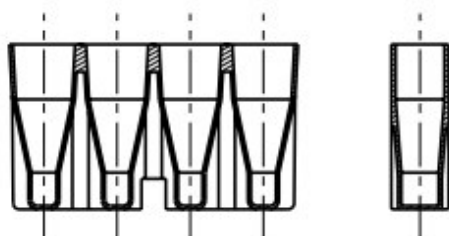


80 521 10

Beispielbild – Packung mit 1000 Küvetten Blöcken



Verpackung:

1. Karton, Maße: (mm) 410 x 260 x 145
2. Etikett – siehe unten

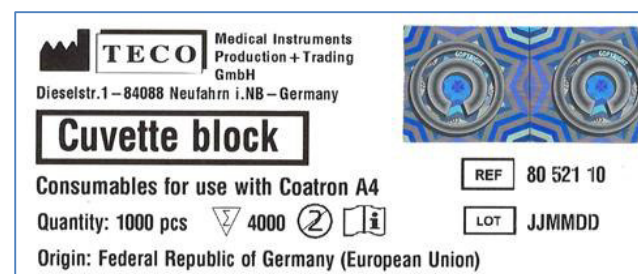

Symbole (wenn zutreffend):

Hersteller	LOT Chargen Nr.	REF Katalog Nummer	Begleitdokumente beachten	Anzahl Bestimmungen	Einmalgebrauch
------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------	----------------